

음파 전동 칫솔(칫솔 별매) 가정용

모델명 MJ-ET1

사용설명서

- 구매해 주셔서 감사합니다.
- 사용하시기 전에 본 사용설명서를 읽은 후 올바르게 사용해 주십시오.
- 본 사용설명서는 보관해 주십시오.

안전상의 주의
각 부분의 명칭과 기능
전지 삽입 방법
사용방법
칫솔에 대하여/ 이럴 때는
관리방법
제품사양

관리방법

오염은 중성세제를 회석하여 천에 적셔서 잘 짜낸 후 닦아내고, 마른 천으로 닦아주십시오.

- <칫솔 씻기>
물로 씻습니다.
● 40 °C 이상의 뜨거운 물로 씻지 말아 주십시오.
- 물로 씻은 후에는 물기를 제거해 주십시오.
- <본체 씻기>
■ 전지 덮개가 제대로 닫혀 있는지 확인하여 주십시오.
물로 씻습니다.
● 40 °C 이상의 뜨거운 물로 씻지 말아 주십시오.
- 물로 씻은 후, 안쪽은 물기로 물기로 물을 충분히 제거해 주십시오.

- <칫솔을 분리하기 어려운 경우>
치약이 굳어서 칫솔을 분리하기 어려운 경우가 있습니다. 본체에 물 또는 미지근한 물을 2~3분 흘린 후에 분리하십시오.

- <휴대하는 경우>
안쪽에 물기가 있는 상태로 파우치나 가방에 넣으면 캡을 닫아도 배수 구멍에서 물이 나와 오염시키거나 손상을 줄 우려가 있으므로 물기를 충분히 제거해 주십시오.

- ▲ 주의
손질할 때는 시너·벤진·스프레이식 클리너 종류는 사용하지 말아 주십시오.
변형·변색의 우려가 있습니다.
- 본체를 씻을 때는 전지 덮개를 제대로 닫아 주십시오.
본체에 물이 들어가 고장의 원인이 됩니다.
- 치사 광선이 닿는 곳이나 자동차 안, 열기구 가까이에 두지 말아 주십시오.
주변의 원인이 됩니다.
- 물 속에 담그거나 방치하지 말아 주십시오.
고장의 원인이 됩니다.

제품사양

전원 방식	1.5 V == AAA 형 알칼리 건전지(LR03) x1개(전지 별매)
칫솔의 스트로크 수(약)	30,000 스트로크/분
전지 수명(20 °C일 때)(약)	180분(1회 2분의 경우 약 90회)
제품 크기(약)	W 24 x D 32 x H 202 mm
제품 중량(약)	70 g(전지, 칫솔 미포함)
세트 내용	본체, 사용설명서

★ 오랫동안 사용한 음파 전동 칫솔을 점검하세요!

사용하실 때	● 전지에서 액체가 있는지 확인하는 경우는 없습니까?	● 평소보다 전지가 빨리 소모되는 경우는 없습니까?	● 전지의 단자에 녹이 생겼습니까?
사용 중지	고장이나 사고 방지를 위해 사용을 중지하고 전지를 빼서 반드시 구매하신 점포로 문의 주십시오.	고장이나 사고 방지를 위해 사용을 중지하고 전지를 빼서 반드시 구매하신 점포로 문의 주십시오.	고장이나 사고 방지를 위해 사용을 중지하고 전지를 빼서 반드시 구매하신 점포로 문의 주십시오.

안전상의 주의

반드시 준수해 주십시오.

제품 및 사용설명서에는 사용하시는 분이나 다른 사람에 대한 위해를 미연에 방지하고, 안전하고 올바르게 사용하기 위해 중요한 내용을 기재하고 있습니다.

다음 내용(표시·그림 기호)을 잘 이해한 후 본문을 읽고 기재 사항을 지켜주십시오.

● 표시의 설명

- ▲ 경고 입는 것이 예상되는 내용입니다.
- ▲ 주의 상해를 입거나 물질적 부상 및 고장의 원인이 될 것입니다.

● 그림 기호의 설명

- 해서는 안 되는 금지의 내용입니다.
- 반드시 실행해야 하는 강제의 내용입니다.

본체에 대해서

▲ 경고

- 어린이의 손이 닿는 장소에 두지 말아 주십시오. 이상 및 고장이 발생한 경우에는 즉시 사용을 중지하는 부품을 잘못 삼켜 사고 및 부상의 원인이 됩니다.

▲ 주의

- 담뱃진 제거용 및 미백용 등 연마제가 많이 포함된 치약은 사용하지 마십시오. 직사광선이 닿는 곳이나 자동차 안, 열기구 가까이에 방치하지 말아 주십시오. 고장의 원인이 됩니다.
- 물 속에 담그거나 변형·변색·고장의 원인이 됩니다. 절대로 분해하거나 수리·개조하지 말아 주십시오. 고장의 원인이 됩니다.

△ 주의 (계속)

- 치아 및 잇몸에 칫솔을 강하게 대거나, 지속적으로 대지 마십시오. 치아 및 잇몸이 상하는 원인이 됩니다.

고장 및 외관에 손상을 줄 우려가 있습니다.

- 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지 말아 주십시오. 부상 및 고장의 원인이 될 것입니다.

- 스위치를 켜는 채로 방지하지 말아 주십시오. 부상 및 고장의 원인이 됩니다.

- 어린이 스스로 조작할 수 없는 분, 입 안의 감각이 약한 분 등은 사용하지 말아 주십시오. 치아 및 잇몸이 상하는 원인이 됩니다.

- 어린이가 사용하는 경우에는 보호자가 지도해 주십시오. 치아 및 잇몸이 상하는 원인이 됩니다.

- 칫솔은 가죽 및 타인과 공유하지 마십시오. 감염의 원인이 됩니다.

- 첫솔질 이외의 용도로 사용하지 말아 주십시오. 고장의 원인이 됩니다.

- 본체를 씻을 때는 전지 덮개를 제대로 닫아 주십시오. 본체에 물이 들어가 고장의 원인이 됩니다.

- 충전식 전지는 사용하지 말아 주십시오.

- 다른 전자는 즉시 끊어 주십시오.

- 전지에 접촉 납땜을 하지 말아 주십시오.

전지에 대해서

▲ 경고

- 알칼리 전지에 대해서
 - 합성, 분해, 가열 및 불에 넣는 등의 행동을 하지 마십시오. 피부 및 의복에 물은 경우에는 깨끗한 물로 씻어 내고, 눈에 들어갔을 때는 깨끗한 물로 씻은 후, 즉시 의사의 치료를 받으십시오. 피부 및 눈에 장애가 발생할 우려가 있습니다.

△ 주의

다음 사항을 지켜주십시오. 전지의 사용 방법이 틀리면 누액 및 발열, 파열 등의 우려가 있으며, 고장이나 부상, 주변 오염의 원인이 됩니다. 전지에 표기되어 있는 주의사항을 반드시 지켜주십시오.

- +양극(-음극을 틀리지 않도록 올바르게 삽입해 주십시오. 본체의 물기를 잘 닦아서 물기가 내부에 들어가지 않도록 해 주십시오.)


- 사용 권장 기한 내의 전지를 사용하여 주십시오. 2주 이상 사용하지 않을 때는 전지를 꺼내 주십시오.

- 충전식 전자는 사용하지 말아 주십시오. 본체에 물이 들어가 고장의 원인이 됩니다.

- 다른 전자는 즉시 끊어 주십시오.

- 전지에 접촉 납땜을 하지 말아 주십시오.

각 부분의 명칭과 기능

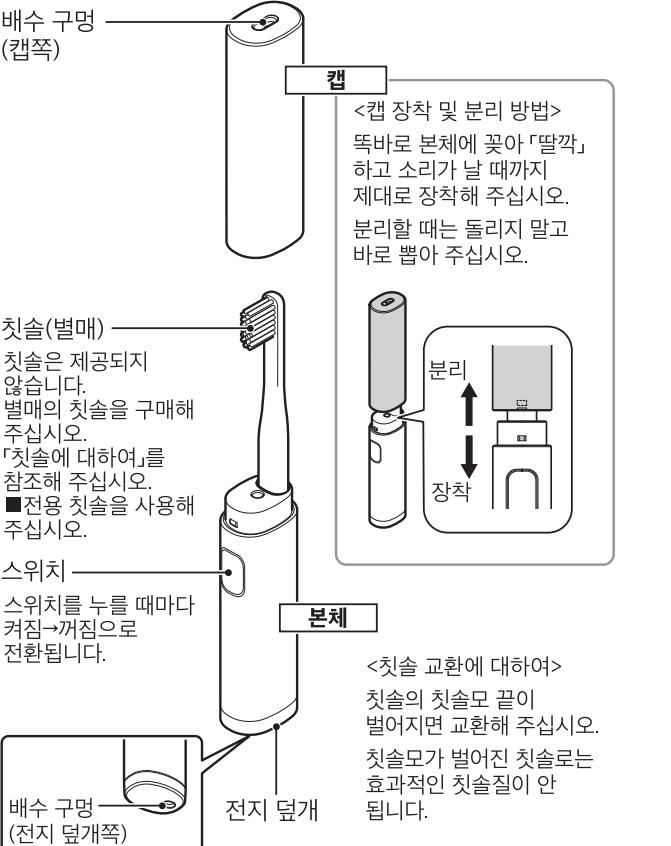

전지 삽입 방법

전지는 제공되지 않습니다.
시판하는 AAA 형 알칼리 건전지(LR03)를 구매해 주십시오.


▲ 주의

- 충전식 전지는 사용하지 말아 주십시오. 누액이나 발열, 파열 등의 우려가 있습니다.

요청 사항

- AAA 형 알칼리 건전지(LR03)를 사용해 주십시오. 다른 건전지로는 힘이 약하거나 전지 수명이 짧은 등 성능을 충분히 발휘할 수 없습니다.
- 전지 잔량이 적어지면 진동이 작아져 칫솔질 감이 악해집니다. 새로운 AAA 형 알칼리 건전지(LR03)로 교환해 주십시오.

1. 전지 덮개를 분리합니다.

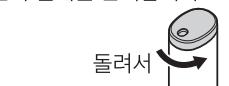

2. 전지를 넣습니다.

AAA 형 알칼리 건전지(LR03)의 + - 를 올바른 방향으로 넣으십시오.

알림


전지의 사용 시간 기준: 약 180분
(1회 2분인 경우 약 90회)

3. 전지 덮개를 닫습니다.




사용방법

3. 입 안에 칫솔을 넣은 후에 스위치를 겁니다.

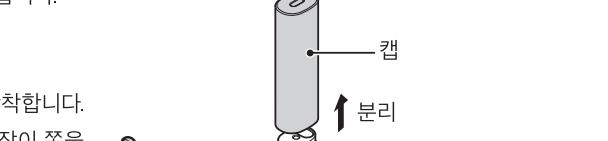


<치아의 안쪽 및 바깥쪽의 표면, 어금니의 교합부분>

- ① 칫솔의 칫솔모 끝을 치아의 표면에 직각으로 약 3~5초간 가볍게 갖다 댕니다. (음파 진동의 힘으로 오염물을 뜨개하여 떨어지기 쉽도록 합니다.)
- ② 한 번에 2~3개씩 모든 치아를 닦습니다.

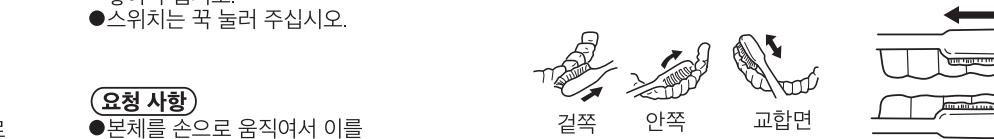


4. 이를 닦습니다.


- 1회 약 2분간을 기준으로 사용해 주십시오.
- 질못된 방향으로 칫솔을 본체에 장착해 대기만 하면 충분히 치석을 제거할 수 없습니다.

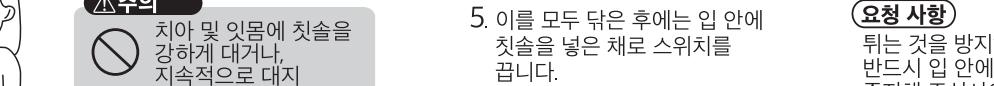


- 치아 및 잇몸에 칫솔을 강하게 대거나, 지속적으로 대지 마십시오. 치아 및 잇몸이 상하는 원인이 됩니다.

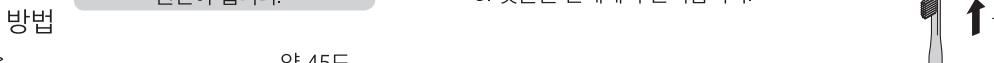

5. 이를 모두 닦은 후에는 입 안에 칫솔을 넣은 채로 스위치를 끍니다.

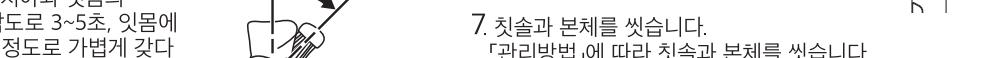

6. 칫솔을 본체에서 분리합니다.

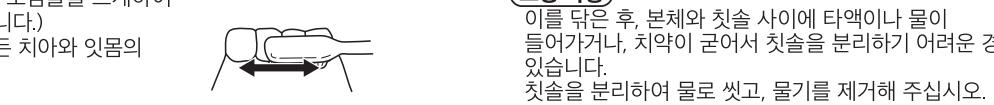

효과적인 칫솔 사용 방법

<치아와 잇몸의 경계면>

- ① 칫솔의 칫솔모 끝을 치아와 잇몸의 경계선에 약 45도 각도로 3~5초, 잇몸에 통증을 느끼지 않는 정도로 가볍게 갖다 댕니다.
- ② 한 번에 2~3개씩 모든 치아와 잇몸의 경계선을 닦습니다.



칫솔에 대하여

칫솔은 소모품입니다.

제품 요청은 구매하신 점포로 문의 주십시오.

본 제품은 아래의 칫솔을 사용할 수 있습니다. 2017년 4월 현재

2017년 4월 현재	색상	JAN 코드	길이
칫솔·극세모	클리어	4549738970507	
	클리어 블루	4549738970514	
	클리어 브라운	4549738970521	
	클리어 엘로우	4549738970538	180 mm
칫솔	화이트	4549738970546	
	블루	4549738970552	
	그레이	4549738970569	
	옐로우	4549738970576	
칫솔·극세모·4색 세트	—	4549738970583	
칫솔·4색 세트	—	4549738970590	

상기 이외의 칫솔은 사용할 수 없습니다.

단 칫솔의 사양 변경에 따라 상기 대상 칫솔이 변경되는 경우가 있습니다.

<교환 기준>